OVAO

MORE THAN A BRAND


Instrukcja obsługi

Model: OVAO-07


www.ovao.com.pl

1. Styki ładowania

Przegląd

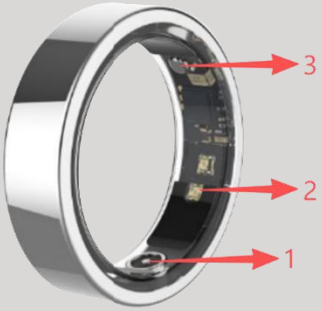

1. Styki ładowania
2. Czujnik tętna (zielone światło) i czujnik tlenu we krwi (czerwone światło)
3. Przetwornik temperatury ciała

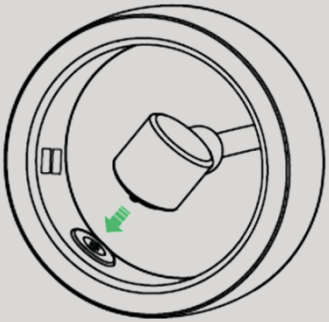

- Upewnij się, że styki ładowania kabla ładującego są prawidłowo podłączone do portu ładowania Smart Ring.
- Naładuj i aktywuj urządzenie przed użyciem. Podłącz kabel USB A do zasilacza.

Kontrolka

1. Podczas podłączania zasilania:

- Ładowanie: Kontrolka inteligentnego pierścienia świeci na czerwono, a kontrolka etui ładującego miga na czerwono.
- Pełne naładowanie: Kontrolka inteligentnego pierścienia świeci na zielono przez około 5 minut, a następnie gaśnie, a kontrolka etui ładującego świeci na czerwono.

2. Bez podłączenia do zasilania:

- Ładowanie: Kontrolka inteligentnego pierścienia świeci na czerwono, a kontrolka etui ładującego miga na zielono.
- Pełne naładowanie: Kontrolka inteligentnego pierścienia świeci na zielono przez około 5 minut, a następnie gaśnie, a kontrolka etui ładującego gaśnie.

3. Kabel ładujący

- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, zacznie migać na czerwono. Będzie migać na czerwono, aż docałkowitego rozładowania.



2. Zainstaluj aplikację i połącz się ze Smart Ringiem

Wyszukaj i zainstaluj aplikację „Oplayer Smart life”w Google Play lub App Store. Możesz też zeskanować.


Aby połączyć Smart Ring z aplikacją, otwórz aplikację „Oplayer Smart Life” na swoim smartfonie, następnie przejdź do ustawień i wybierz „Połącz inteligentne urządzenie”, a następnie wybierz Smart Ring, aby połączyć.

3. Funkcje



Aktywności

Po założeniu inteligentnego pierścienia będzie on rejestrował Twoje kroki, dystans i kalorie w aplikacji.

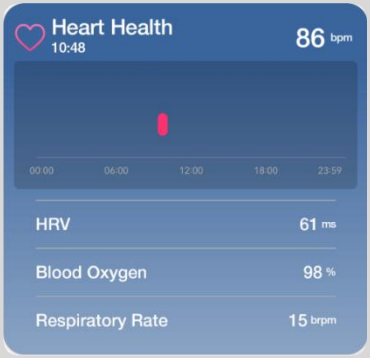


Aktywny pomiar zdrowia serca

Kliknij i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby aktywnie wykrywać tętno/tlenokrwinkę/HRV/częstotliwość oddechów.




Aktywny pomiar zdrowia emocjonalnego

Kliknij i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby aktywnie wykryć stres/emocje/zmęczenie.

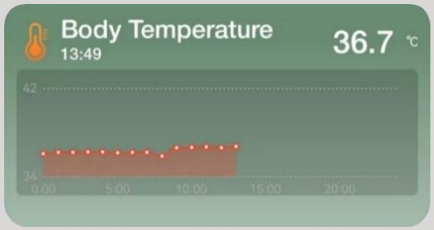

Temperatur ciała

Kliknij i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby aktywnie wykrywać temperaturę ciała.

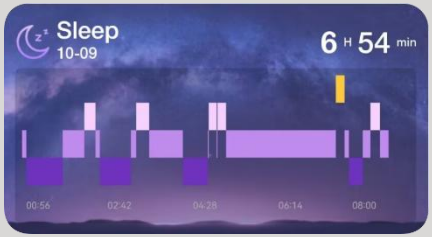


Sen

Śpij z włączonym inteligentnym pierścieniem. Śledzi on Twój sen przez cały dzień w aplikacji.



Personal Activity Intelligence - PAI
(Osobisty Wskaźnik Aktywności)

Twój wynik zdrowia zostanie obliczony na podstawie danych z poprzedniego dnia.

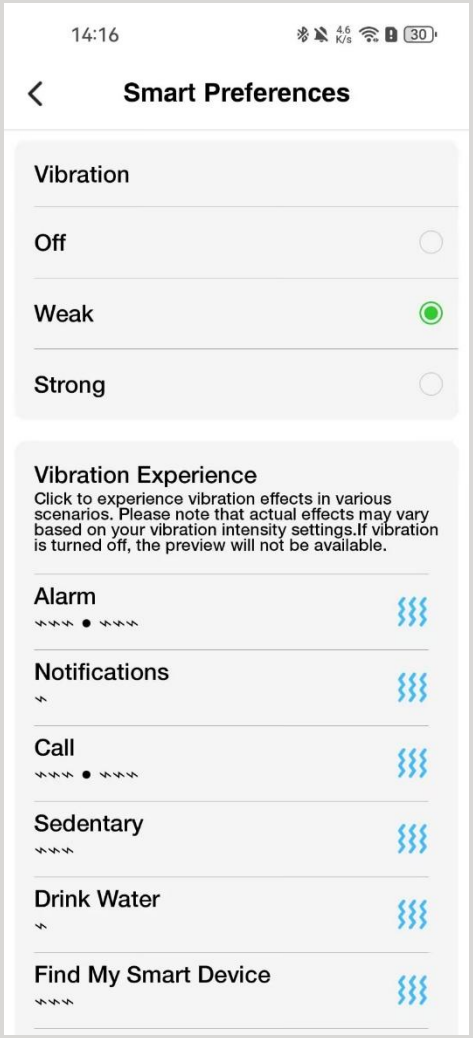

Podgląd wibracji

W tym interfejsie możesz dostosować intensywność wibracji dla poniższych funkcji: Alarm, Powiadomienia, Dzwonek połączenia przychodzącego, Siedzący tryb życia, Pij wodę, Znajdź moje urządzenie inteligentne.


Możesz również wyświetlić podgląd odpowiedniego statusu wibracji, klikając ikonę wibracji poniżej, aby rozróżnić, która funkcja uruchamia przypomnienie.

Ważne! Gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej 20%, funkcja wibracji zostanie wyłączona.



Sport

Do wyboru jest 120+ trybów sportowych, w tym chodzenie, bieganie, wspinaczka, koszykówka, jazda na rowerze, joga i tak dalej.

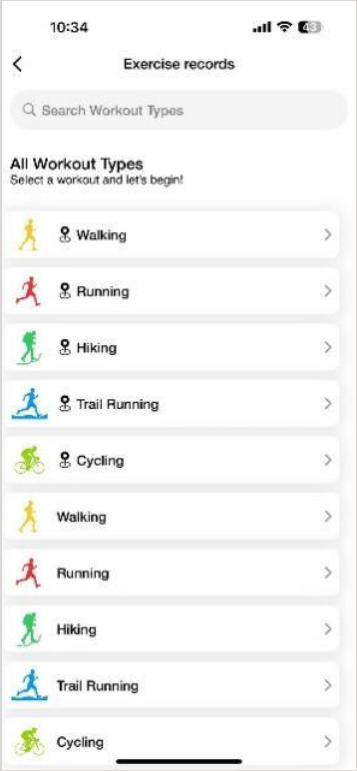

Wybierz tryby sportowe, aby rozpocząć w aplikacji, a dane dotyczące ćwiczeń zostaną przesłane do aplikacji za pośrednictwem pierścienia i wyświetlone w aplikacji. Pamiętaj, że pierścień i telefon komórkowy muszą być połączone.